

# Utilización del infusor elastomérico


Un infusor elastomérico administra medicamentos a través de una cámara en forma de globo. El medicamento se administra mediante la presión ejercida por el globo a una velocidad constante y segura.

## Preparación

- 1 Lávese o desinfecte las manos por lo menos 20 segundos.



- 2 Revise el nombre, la dosis de medicamento, y la fecha de vencimiento en la etiqueta.

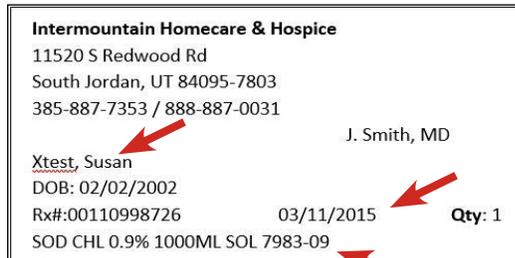

- 3 Prepare los suministros:

- Dos (2) jeringas de enjuague (solución salina)
- Jeringa con heparin, si es necesario
- Toallitas estériles
- Tapa de alcohol desinfectante
- Dispositivo elastomérico
- Medicamento. Puede calentarse a temperatura ambiente, si se desea. Déjelo en un mostrador limpio.



## Mis medicamentos

Medicamento: \_\_\_\_\_

Horario: \_\_\_\_\_

- Jeringa prellenada       Jeringa llena con medicamento

**ENJUAGUE S.A.S.**      mL = mililitro

Solución Salina: \_\_\_\_\_ mL

Administrar medicamento

Solución Salina: \_\_\_\_\_ mL

## Need help or have questions?

Enfermera o enfermero: \_\_\_\_\_

Número de teléfono: \_\_\_\_\_

Intermountain Homecare & Hospice:  
**385-887-6000** o **800-527-1118**

Escanee el código QR con su teléfono celular para ver las instrucciones en video.

Enlace: [bit.ly/3pBjcK5](http://bit.ly/3pBjcK5)



## Prepare los tubos del dispositivo

**1 Abra** la pinza de los tubos del dispositivo.



**2 Vigile** hasta que vea que el medicamento gotea por el final.



**3 Cierre** la pinza.



## Prepare las jeringas

**1 Remueva** la tapa de la jeringa.



**2 Toque suavemente** la jeringa para mover el aire hacia la punta.



**3 Empuje el émbolo** para remover el aire y cualquier solución adicional. Si es difícil empujar, jale el émbolo hacia atrás un poco para romper el sello.



**4 Reemplaza** la tapa de la jeringa. Déjelo en su sitio hasta que este listo para utilizarla.




## Administre los medicamentos

**1 Remueva** la tapa de alcohol de su línea intravenosa y coloque una jeringa de solución salina normal. **Enjuague** la línea.



**2 Coloque** el dispositivo elastomérico con firmeza al conector sin aguja.

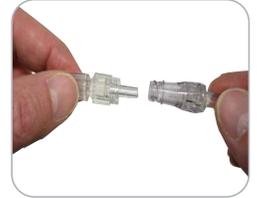

**3 Abra** la pinza de la línea. Coloque el dispositivo elastomérico en un bolsillo o bolsa durante la infusión.



## Después de la infusión


**1 Límpiese las manos** con una solución limpiadora.



**2 Cierre** la pinza.



**3 Desconecte** los tubos del dispositivo del conector sin aguja.

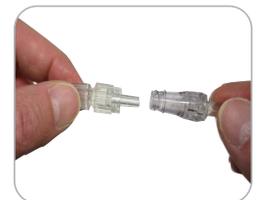

**4 Enjuague** con solución salina.

**5 Enjuague** con heparina si se le ha indicado.

**6 Desheche** el dispositivo vacío en un bote de basura.

**7 Reemplace** la tapa de alcohol de la línea IV.



Contenido creado y aprobado por Intermountain Homecare & Hospice

Using an Elastomeric Device

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.