

Cómo administrar el medicamento con una bomba Freedom 60

PASO 1: preparación

1 Lávese o desinfecte las manos al menos por 20 segundos:



2 Revise el nombre, la dosis del medicamento y la fecha de vencimiento en la etiqueta del medicamento:

Intermountain Homecare & Hospice	
11520 S Redwood Rd South Jordan, UT 84095-7803 385-887-7353 / 888-887-0031	
	J. Smith, MD
Xtest, Susan	
DOB: 02/02/2002	
Rx#:00110998726	03/11/2015 Qty: 1
SOD CHL 0.9% 1000ML SOL 7983-09	
Directions	

3 Distribuya sus suministros:

- Bomba Freedom60
- Tubos de la bomba Freedom60
- Jeringa con medicamento. (Caliente el medicamento a temperatura ambiente si está refrigerado).
- Jeringas para el enjuague (2 para solución salina y 1 para heparina, si es necesario)
- Paños estériles y tapa de alcohol desinfectante



¿Necesita ayuda o tiene preguntas?

Escanee el código QR para ver un video que enseña como usar la bomba. O, puede llamar al teléfono a continuación/



Enfermero: _____

Número telefónico: _____

Intermountain Homecare & Hospice:
385-887-6000 o 800-527-1118

Mis medicamentos

Medicamento: _____

Horario: _____


Enjuague S.A.S	Enjuague S.A.S.H.
Solución salina: _____ mL	Solución salina: _____ mL
Administre el medicamento	Administre el medicamento
Solución salina: _____ mL	Solución salina: _____ mL
	Heparina: _____ mL

PASO 2: prepare la jeringa con su medicamento

- 1 Conecte el tubo a la jeringa.



- 2 Presione el émbolo de la jeringa hasta que salta una gota del final del tubo.

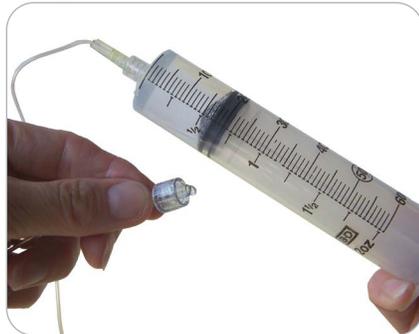

PASO 3: cargue la jeringa en la bomba

- 1 Confirme que la bomba esté APAGADA (OFF) y que la lengüeta negra esté en el extremo posterior de la bomba.



- 2 Inserte el extremo del émbolo de la jeringa debajo de la cubierta transparente.




PASO 4:

Freedom 60 Pump




administre el medicamento

- 1 Remueva la tapa de alcohol del tubo de la vía intravenosa (IV) y conecte una jeringa de enjuague de solución salina. Enjuague la vía.

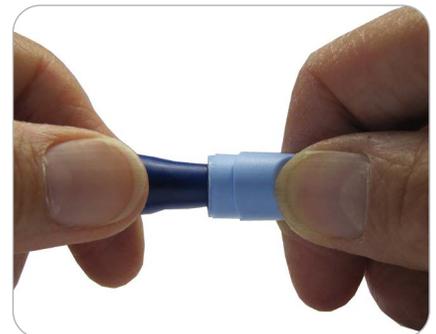

- 2 Conecte el tubo de la bomba.

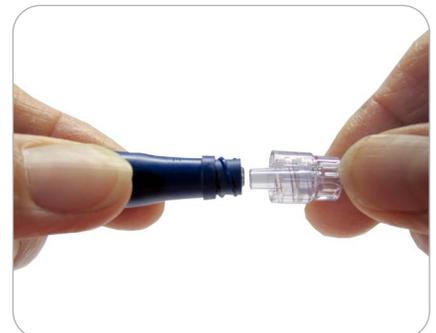

- 3 Encienda la bomba.



PASO 5: después de la infusión

- 1 Lávese las manos.



- 2 Apague la bomba.



- 3 Gire el botón de la bomba hasta que la lengüeta negra llegue hasta el tope.



- 4 Desconecte el tubo de la vía intravenosa. Enjuague la vía y coloque una tapa de alcohol de color azul claro.



PASO 6: reutilizar el tubo

Es posible reutilizar el tubo por hasta 24 horas.

- 1 Proteja el extremo del tubo con una tapa de alcohol nueva.



- 2 Deje el tubo conectado a la jeringa vacía hasta la siguiente dosis.



Notas

Content created and approved by Intermountain Homecare & Hospice

Giving Medication with a Freedom60 Pump

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.