

Cuidado de la manta de fototerapia BiliTx™: capacitación y pautas de seguridad

Para la seguridad de su bebé

Seguir estas pautas de seguridad le ayudará a reducir posibles riesgos.

- Use la manta de fototerapia solo para su uso previsto.
- Siga los consejos de su médico al usar oxígeno con la manta de fototerapia.
- No opere la manta de fototerapia sin el chaleco en T (D).
- No derrame líquido sobre el equipo. Podría producirse una descarga eléctrica o falla del equipo. Si se moja, desenchufe la manta de fototerapia de inmediato y séquela. Vuelva a activar la manta de fototerapia cuando esté totalmente seca.
- No deje a su bebé sin supervisión mientras usa la manta de fototerapia.
- Deje que circule aire por la unidad de iluminación.
- Apague la unidad de iluminación (A) cuando el bebé no tenga el chaleco en T (D).

No use ningún tipo de lociones, aceites o cremas en la piel expuesta del bebé durante la terapia.

Consulte el sitio web del fabricante si quiere obtener más información sobre su equipo.

Para la instalación de la manta de fototerapia, elija un lugar con las siguientes características:

- Temperatura ambiente de 72 °F (22 °C) o más.
- Una superficie plana y sólida, alejada de corrientes de aire, como una cama, una cuna o la mesa del comedor.
- Fácil acceso a un tomacorriente eléctrico.
- Fácil acceso para los cuidadores.
- Lejos de sustancias inflamables o artículos de limpieza.



Instalación de su manta de fototerapia

El kit de la manta de fototerapia incluye:


A. Unidad de iluminación

B. Casquillo


C. Cable eléctrico

D. Chaleco en T

E. Panel

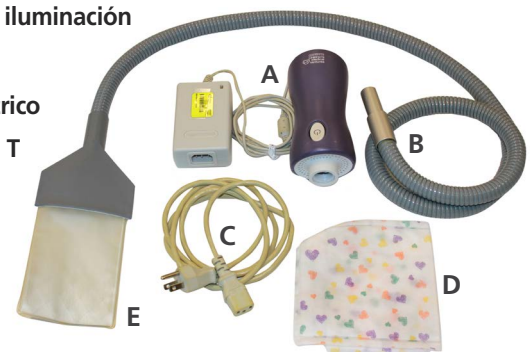


- 1 Coloque la **unidad de iluminación (A)** sobre una superficie dura y plana. También puede colgar la unidad en la parte externa de una cuna usando la caja de transporte.
- 2 Inserte el **casquillo (B)**, con la clavija de metal hacia arriba, en la abertura de la **unidad de iluminación (A)**. Gire el **casquillo (B)** un cuarto de vuelta para fijarlo en el lugar.
- 3 Enchufe el **cable eléctrico (C)** en la **unidad de iluminación (A)** y un tomacorriente eléctrico.
- 4 Deslice el **panel (E)** con la etiqueta autoadhesiva hacia abajo hasta el bolsillo del **chaleco en T (D)**.
- 5 Coloque el **panel cubierto (E)** sobre una superficie plana asegurándose de que el lado de la etiqueta autoadhesiva del panel quede hacia abajo.

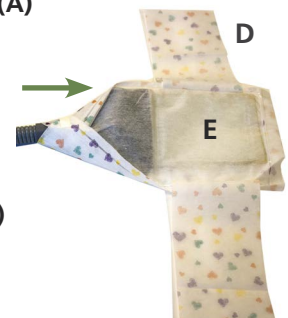

Colocar a su bebé en el chaleco en T

1 Coloque a su bebé sobre la parte superior del **chaleco en T (D)** cubriendo el **panel (E)**. Mantenga el pañal de su bebé encima. La espalda de su bebé debe estar sobre el **panel (E)** y el cable debe quedar entre las piernas del bebé.

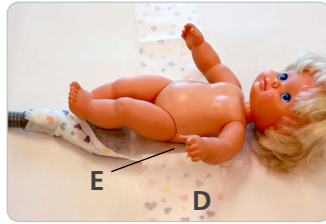

2 Envuelva a su bebé con el **chaleco en T (D)** (una lado a la vez) y sujételo con la lengüeta.



Consejos sobre el chaleco en T

- Asegúrese de no envolver el **chaleco en T (D)** demasiado ajustado. Su dedo debe caber fácilmente entre el **chaleco en T (D)** y el cuerpo de su bebé.
- Envuelva a su bebé en una manta o ponga al bebé en una cuna para un mayor ajuste. Durante la terapia, puede recostar a su bebé en su cuna o sostenerlo en sus brazos.
- En el caso de un bebé más grande o más activo, pegue el **chaleco en T (D)** con cinta adhesiva al pañal de su bebé.
- Si el **chaleco en T (D)** se ensucia, deséchelo y use uno nuevo. Recibirá algunos **chalecos en T (D)** adicionales.

Comenzar la terapia

- 1** Encienda la **unidad de iluminación (A)** presionando el botón de encendido.
- 2** Asegúrese de que la luz verde de encendido esté encendida.
- 3** Verifique que el **panel (E)** esté iluminado debajo del bebé.

**Llame a Intermountain
Homecare & Hospice
si tiene problemas con la
manta de fototerapia:
1-800-527-1118**

Solución de problemas

Problema	Acción
El botón de ON/OFF (encendido/apagado) no está de color verde	Asegúrese de que el cable eléctrico esté bien conectado a la unidad de iluminación y enchufado a un tomacorriente eléctrico activo. Revise bien que la unidad esté encendida.
El panel no está iluminado	Asegúrese de que el casquillo esté bien colocado en la unidad de iluminación.
La luz LED amarilla de la unidad de iluminación parpadea	Asegúrese de que el casquillo esté bien colocado en la unidad de iluminación.
El dispositivo no se apaga con el botón de ON/OFF (encendido/apagado)	Presione el botón de ON/OFF (encendido/apagado) de la terapia (que se encuentra en la unidad de iluminación) y manténgalo presionado durante 3 segundos.

Contenido creado y aprobado por Intermountain Homecare & Hospice

BiliTx™ Biliblanket Care: Training and safety guidelines

Intermountain Healthcare cumple con las leyes de derechos civiles federales vigentes y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.

© 2010-2021 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica.
Intermountain Patient Education FSHC0055-11/21 (Last reviewed - 11/21) (Spanish translation 11/21 by CommGap)