

# BiliBed: capacitación y pautas de seguridad

## Para su seguridad y la de su bebé


Seguir estas pautas de seguridad le ayudará a reducir posibles riesgos:

- Use el dispositivo BiliBed solo con la manta terapéutica Bilicombi de Medela. La manta Bilicombi mantiene al bebé en la posición correcta para una fototerapia eficaz. El efecto terapéutico del dispositivo BiliBed solo puede garantizarse si se utiliza la manta Bilicombi.
- Supervise al bebé a menudo durante el tratamiento de fototerapia. Si el bebé parece estar caliente, asegúrese de lo siguiente:
  - Las ranuras de ventilación en el dispositivo no estén cubiertas con almohadas o cubiertas.
  - Haya espacio suficiente alrededor del dispositivo BiliBed (en especial, en la cabecera y los pies) para permitir la circulación de aire.
- No deje a su bebé sin supervisión durante la fototerapia.
- No le pida a una madre primeriza que intente levantar el dispositivo BiliBed. El peso de la unidad es superior al peso que se recomienda levantar después del parto.
- Siga el consejo de su médico al usar oxígeno con la fototerapia.
- No derrame líquidos sobre el equipo. Podría producirse una descarga eléctrica o la falla del equipo.
- Consulte el sitio web del fabricante si desea obtener más información sobre el dispositivo BiliBed.

## Elegir un lugar para el dispositivo BiliBed

Al instalar el dispositivo BiliBed, elija un lugar que tenga las siguientes características:

- Una superficie plana y sólida, alejada de corrientes de aire, como una cama, una cuna o la mesa de la cocina.
- Un tomacorriente eléctrico accesible
- Un lugar donde usted pueda supervisar a su bebé fácilmente

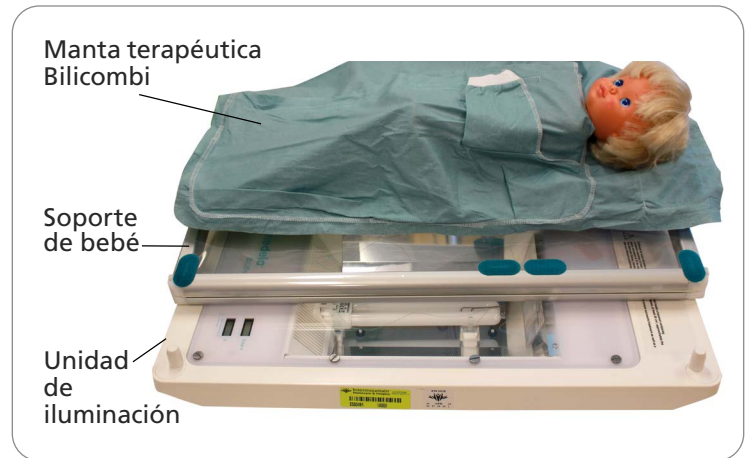

## Instalar el dispositivo BiliBed

- 1 Coloque la unidad de iluminación sobre una superficie plana y firme, como una mesa o el colchón de la cuna.
- 2 Coloque el soporte donde se ubicará el bebé encima de la unidad de iluminación.
- 3 Conecte la manta Bilicombi al soporte del bebé. Ubique la manta usando como guía el dibujo que se encuentra en el soporte del bebé.
- 4 Conecte el cable eléctrico en la unidad de iluminación.

## Vestir al bebé con la manta terapéutica Bilicombi

- Revise la manta Bilicombi antes de cada uso. Asegúrese de que la manta Bilicombi no esté dañada y que los sujetadores de Velcro garanticen un ajuste correcto al soporte de bebé. Si no es así, reemplácela por una manta Bilicombi nueva.
- Conecte la manta Bilicombi al soporte de bebé.
- Abra la manta Bilicombi lavable o desabroche los sujetadores de Velcro en la chaqueta de la manta Bilicombi desechable.
- Coloque al bebé de espaldas en la manta Bilicombi asegurándose de que sus brazos queden dentro de las mangas.
- Cierre la tira de Velcro.

## Iniciar la terapia

Para iniciar la terapia con el dispositivo BiliBed, asegúrese de lo siguiente:

- Enchufar el cable eléctrico en un tomacorriente con conexión a tierra.
- Iniciar la unidad de iluminación con el botón de INICIAR/DETENER (START/STOP).

## Durante la terapia

Siga estos pasos durante la terapia:

- Supervise a su bebé para asegurarse de que no esté demasiado caliente o frío.
- Asegúrese de que la manta Bilicombi esté ubicada correctamente para garantizar un tratamiento exitoso. Vea “Instalar el dispositivo BiliBed” en la [página 1](#).
- Mantenga a su bebé bajo la luz del dispositivo BiliBed tanto como sea posible, para obtener los mejores resultados de la terapia. Siga las instrucciones de su médico.

**No use ningún tipo de lociones, aceites o cremas en la piel expuesta del bebé durante la terapia.**

## Limpiar su dispositivo BiliBed

Para limpiar el dispositivo BiliBed después del uso, siga estos pasos:

- Desenchufe el dispositivo BiliBed del suministro eléctrico.
- Limpie la unidad de iluminación y las superficies exteriores del soporte de bebé con un paño húmedo.
- No use soluciones de limpieza, como limpiadores para electrodomésticos.
- Lave a mano la manta Bilicombi con agua tibia a caliente cuando esté sucia, y cuélguela para que se seque.
- Asegúrese de que los sujetadores de Velcro que se encuentran debajo de la manta Bilicombi y en el soporte de bebé se adhieran correctamente después del lavado. Si no se adhieren bien, use una manta Bilicombi nueva.

**Llame a Intermountain  
Homecare & Hospice  
si tiene problemas con el  
dispositivo BiliBed:  
1-800-527-1118**

## Solución de problemas

Problema	Acción
La luz azul no enciende cuando usted presiona el botón de INICIAR/DETENER (START/STOP).	Asegúrese de que el cable eléctrico esté enchufado correctamente. Si la luz sigue sin encender, enchufe otro aparato eléctrico en el tomacorriente para probar la corriente.
La luz de encendido se apaga durante la terapia.	Revise si el ventilador está bloqueado por una manta u otro objeto que hace que la unidad se recaliente.
La luz LED de advertencia está encendida.	Comuníquese con Intermountain Homecare & Hospice.

Contenido creado y aprobado por Intermountain Homecare & Hospice

BiliBed: Training and safety guidelines

Intermountain Healthcare cumple con las leyes de derechos civiles federales vigentes y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.

©2019-2021 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. Intermountain Patient Education. FSHC0045-11/21 (Last reviewed - 11/21) (Spanish translation 11/21 by CommGap)