


Administrar la alimentación enteral con una bomba Infinity

Preparación y carga del kit de sonda desechable:

- 1 Antes de preparar la bomba, llene la bolsa de alimentación con fórmula, con cuidado apriete la bolsa para sacar el aire y cierre la tapa.



- 2 Quite la tapa protectora de la punta de la sonda. Use el adaptador de cono blanco o quítelo y use la conexión ENFit, según sea necesario, para conectarlo a la sonda.

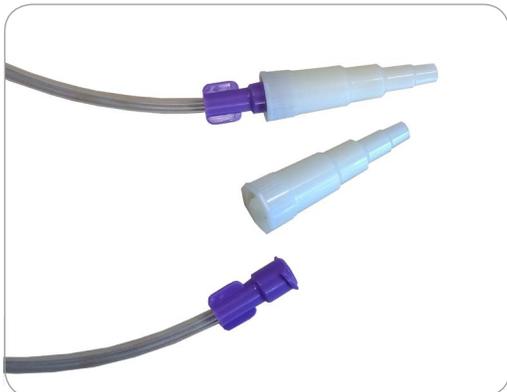

- 3 Apriete y detenga con cuidado la sonda color verde azulado debajo del símbolo de gota. Esto abrirá la válvula y le permitirá apretar la sonda con las manos para permitir que la fórmula pase.



- 4 Abra la tapa de la bomba y abroche la sonda de silicona color verde azulado alrededor de la rueda, estirando ligeramente. Coloque el cartucho en la bomba.


Cierre la tapa de la bomba. La tapa debe estar cerrada para que funcione la bomba. Si la tapa se rompe, llame al equipo enteral.



Conectela bomba al tubo y cuelgue la bolsa de alimentación.


O

Guarde la bomba, bolsa y sonda en la mochila, y asegure la bomba, bolsa y sonda con las correas.

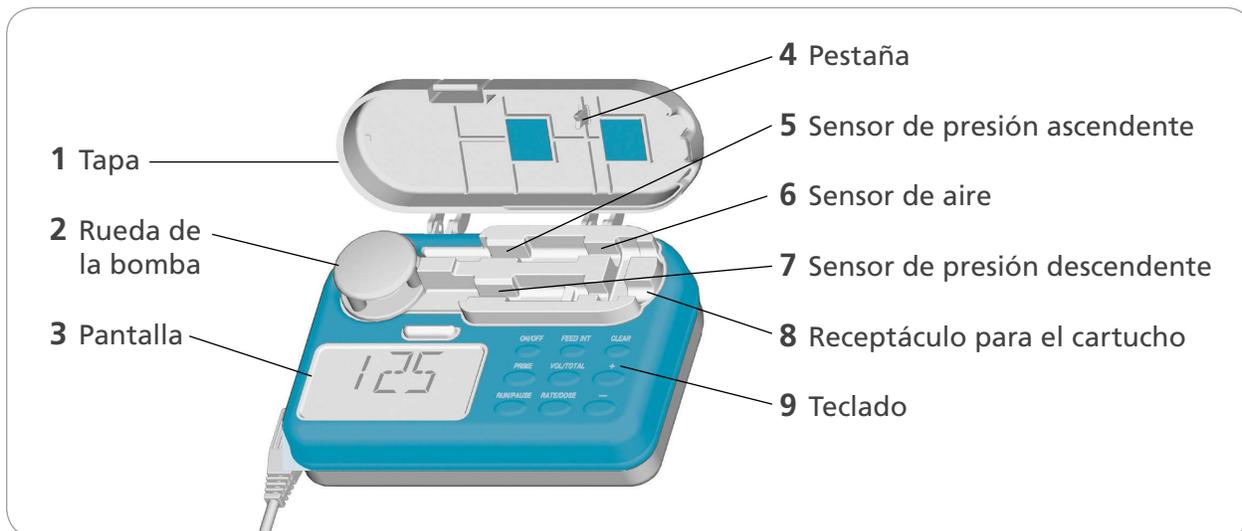


Programación y puesta de la bomba:

- 1 Mantenga presionada la tecla **ON/OFF** por 1.5 segundos para prender la bomba. La pantalla mostrará varios números; esto es una prueba automática. Después de la prueba automática, la pantalla mostrará el último flujo programado.

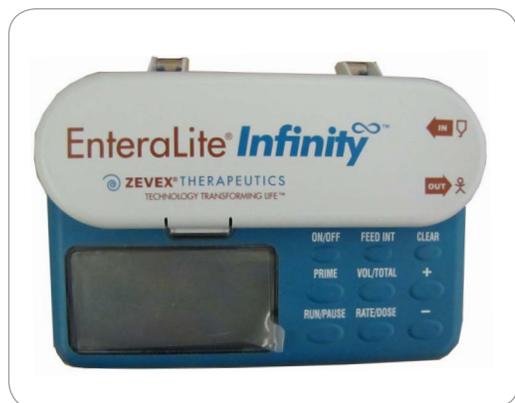


- 2 Presione la tecla **RATE/DOSE** (tasa/dosis) para mostrar el flujo (vea la esquina inferior izquierda de la pantalla). Programe el flujo con las teclas (+) y (-).

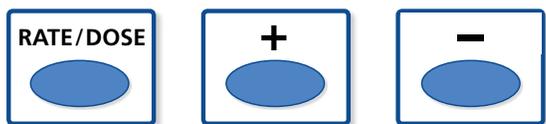

- 3 Presione la tecla **RATE/DOSE** para mostrar la dosis.


Programa la dosis con las teclas (+) y (-). Fije la dosis con **INF**. Esto significa que la alarma de la bomba no sonará **DOSE DONE** (dosis completa). La bomba trabajará de manera continua mientras que haya fórmula en la bolsa. Al terminarse, la bomba mostrará la alarma: **NO FOOD** (sin alimento) o **NO FLOW IN** (sin flujo de entrada).

Enjuague la sonda de alimentación.

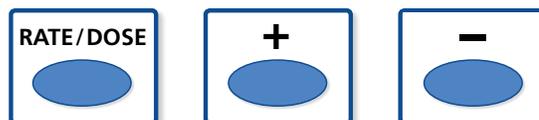


- 4 Conecte la bolsa de alimentación preparada y la sonda a la sonda de alimentación.

- 5 Presione la tecla **RUN/PAUSE** (iniciar/pausa) para prender la bomba.

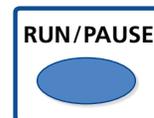

- 6 Al terminar la alimentación, presione la tecla **ON/OFF** (encender/apagar) por 1.5 segundos para apagar la bomba.

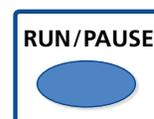

- 7 Enjuague la sonda de alimentación después de desconectarla.

Vea los consejos de solución de problemas en la página 3. →

Guía para la solución de problemas de las alarmas

<p>No Flow In (sin flujo de entrada) O No Flow Out (sin flujo de salida)</p>	<p>No Flow In (bloqueo entre el equipo y la bomba) O No Flow Out (bloqueo entre la bomba y el paciente)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿La sonda del equipo está pinchada, torcida o bloqueada? Arregle las torceduras, pinchadas o bloqueos. Continúe la alimentación. • Si el sensor de presión está sucio, límpielo con una bolita de algodón, paño suave, esponja húmeda o lave la bomba con agua corriente. • Si la pestaña de la tapa está rota, puede causar que suene la alarma. Llame al equipo enteral.
<p>ERRA, ERRD, ERRF (error)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esto puede ocurrir si la tapa de la bomba está abierta o se abre al estar la bomba prendida. Apague la bomba, abra la tapa, saque y vuelva a colocar el cartucho, cierre la tapa y vuelva a prender la bomba.
<p>Load Set (carga preparada)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apague la bomba. • Revise que la tapa esté cerrada. • Saque y vuelva a colocar el cartucho, cierre la tapa y vuelva a prender la bomba.
<p>Alarma No food (sin alimento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enjuague y rellene la bolsa con fórmula, si es que está vacía. • Si hay aire en la bolsa o la sonda, apriete con la mano para que salga y continúe la alimentación. • Si la fórmula tiene espuma o burbujas, espere 10 a 15 minutos antes de volver a comenzar la alimentación.
<p>Low battery (batería baja)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está conectado adecuadamente el cargador/adaptador CA al enchufe y a la bomba? Asegúrese de que el enchufe funcione correctamente. La luz verde del cable se prenderá y el símbolo de batería de la bomba mostrará parpadeos.
<p>Problemas de carga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revise la conexión del enchufe y el cargador/adaptador de la bomba. La luz indicadora verde del cargador debe estar encendida y la pantalla de la bomba debe tener el símbolo de enchufe con barras de desplazamiento entre E y F del indicador. Las barras dejarán de desplazarse cuando la bomba esté completamente cargada. • Conecte otro aparato al enchufe para verificar que el enchufe funcione correctamente. • Si el símbolo de batería y E y F del indicador parpadea, contacte al equipo enteral.

¿Necesita ayuda o tiene preguntas?

Equipo enteral

385-887-7356

Números principales de Intermountain Homecare

385-887-6000 | 800-527-1118 (llamada gratuita)

Content created and approved by Intermountain Homecare & Hospice

Giving an Enteral Feeding with an Infinity Pump

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.