

Hablemos Acerca De...

El cuidado del aparato auditivo de su niño


Con un cuidado regular, el aparato auditivo de su niño le puede ofrecer años de servicio confiable.

Limpieza del aparato auditivo del niño

- 1 Limpie el aparato auditivo varias veces durante la semana. Use un trapito suave para limpiar la superficie.
- 2 El cuerpo del aparato auditivo nunca debe introducirse en agua.
- 3 Si no puede limpiar el molde de la oreja con un trapito suave, separe el molde de donde se conecta el tubo blando con el gancho de plástico duro (ver dibujo). Después puede remojar el molde de la oreja en agua tibia con jabón. Puede usar un cepillo pequeño o un palillo suavemente hasta que el molde quede limpio.
- 4 Asegúrese que el molde de la oreja y el tubo estén completamente secos antes de unirlos. Una bombilla especial para secar (bulb-blower), que puede conseguir con su audiólogo, puede usarse para soplar aire por el tubo. Nunca use un secador de cabello, calentador u horno de microondas para secar el aparato auditivo o el molde de la oreja.
- 5 Si el aparato auditivo o molde de la oreja necesitan más limpieza consulte con su audiólogo. También se le recomienda visitar regularmente a su audiólogo para que limpie y revise el aparato auditivo de su niño.

Consejos de seguridad

- Revise el audio y la batería todos los días para asegurarse que la amplificación es

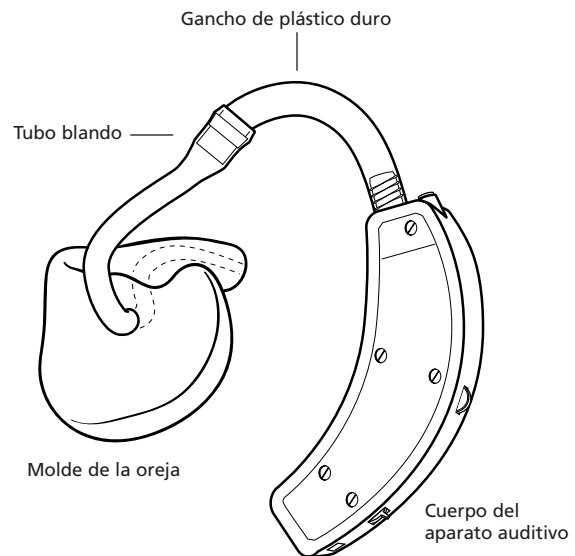

adecuada. Vea la sección “chequeo diario” de este folleto.

- No permita que su niño se bañe (duche), tome un baño de tina, nade con el aparato auditivo puesto, o que lo moje de cualquier otra forma.
- Quite el aparato auditivo y colóquelo sobre una superficie blanda (alfombra, toalla, almohada, etc.) en caso de que se caiga accidentalmente.
- No exponga el aparato auditivo a temperaturas muy frías o calientes. Nunca deje el aparato auditivo cerca de un radiador, en la guantera o en el tablero del automóvil.
- No exponga el aparato auditivo a químicos o limpiadores (incluyendo alcohol), polvo y suciedad.
- No introduzca alfileres, sujetapapeles (clips) o ninguna otra cosa al aparato auditivo. Pida a su audiólogo que revise el aparato auditivo si las aberturas están tapadas.

- Mantenga el aparato auditivo alejado de animales. El olor del aparato auditivo atrae a perros y gatos, quienes lo mastican y destruyen.
- Trate de no cambiar los controles o baterías del aparato auditivo enfrente de los niños a menos que les esté enseñando. Si el aparato auditivo de su niño no tiene un seguro en la tapa del compartimiento de la batería para que éstas no se aflojen o se caigan, por favor consulte con su audiólogo.
- No preste el aparato auditivo de su niño a ninguna otra persona, porque les puede causar daño a su capacidad auditiva.

¿Debe reparar el aparato auditivo?

No trate de reparar el aparato auditivo de su niño usted mismo. Si abre el aparato auditivo puede cancelar la garantía con que cuenta el aparato. Comuníquese con su audiólogo si está preocupado acerca de su funcionamiento. Asegúrese de informarse y entender que tipo de garantía o cobertura tiene el aparato auditivo con respecto a pérdida, daño o reparación. Su audiólogo tiene esta información disponible.

¿Cómo se cuida el molde de la oreja?

Los moldes de la oreja son de silicona, vinilo (vinil) u otros materiales plásticos. Estos deben limpiarse con un trapito según lo necesiten (generalmente varias veces por semana). Cuando no está puesto, la cerilla (cera) y fragmentos acumulados en el molde se pueden quitar con un picadiente (mondadiente, escarbadiente). Tenga cuidado de no dañar el molde de la oreja. Si el molde necesita limpieza más profunda, puede separarlo del aparato auditivo y remojarlo en una solución de detergente suave (como el detergente de platos). Evite químicos ásperos tales como alcohol o detergente de la máquina lavadora de platos.

Con el uso, los moldes de la oreja usualmente se empiezan a ver amarillentos, y aunque no

tengan buena apariencia, esto no daña el molde ni el oído de su niño.

Higiene y el aparato auditivo

- Su niño debe quitarse el aparato auditivo antes de ponerse fijador de cabello, gel, aceite, etc. El aparato auditivo se puede colocar de nuevo cuando las aplicaciones en el cabello se hayan secado.
- Quite el aparato auditivo cuando su niño se peine, cepille o seque el cabello.
- Proteja el aparato auditivo de mucha transpiración. Si la humedad y/o el sudor es un problema continuo, hable con su audiólogo. Hay varios productos que le pueden ayudar.

Baterías

Los aparatos auditivos y sus baterías son muy peligrosos si se tragan. Además, son tan pequeños que los niños se sienten atraídos a ponérselos en la boca. Trate de no dejar las baterías sueltas por la casa. El aparato auditivo se puede cambiar por uno que tenga un seguro en la tapa del compartimiento de la batería y así prevenir que se aflojen, y también para controlar el volumen del aparato. Cada compañía tiene diferentes procedimientos. Por favor revise con su audiólogo si el aparato auditivo de su niño no incluye estos detalles. Cuando no se usen, el aparato auditivo y las baterías deben estar fuera del alcance de animales, niños y personas con enfermedades mentales.

En caso de que alguien se trague una batería, llame inmediatamente a su doctor o al Centro de Control de Intoxicaciones (Poison Control Center). El número telefónico de este centro en Salt Lake City es el 581-2151 ó 1-800-456-7707.

Puede comprar las baterías en la mayoría de las tiendas de aparatos electrónicos, de comida o de artículos varios. Existen dos tipos de batería: zinc-aire (zinc-air) y plata. No trate de recargar

ningún tipo de batería. Las baterías de mercurio ya no están disponibles por disposiciones ambientales.

Las baterías de zinc-aire son por lo general la mejor compra ya que duran más. Las reconocerá por la barra de color en la parte posterior de la batería (los colores varían dependiendo del tamaño de la batería). La barra de color protege una pequeña abertura en la batería. Por lo regular, las baterías de zinc-aire ofrecen energía más confiable y consistente. Estas baterías son las que duran más al estar guardadas y no deben refrigerarse.

Las baterías de plata no son tan comunes, pero tienden a ser más caras y a durar menos tiempo. Esta batería se va acabando lentamente, y requiere ajustar continuamente el volumen del aparato a medida que la batería vaya perdiendo potencia. Las baterías de plata pueden ser refrigeradas cuando se guardan.

Prueba y almacenamiento de baterías

Las baterías deben probarse por la noche, después de ser usadas. El probarlas por la mañana, después de un período en que no se han usado, puede darnos un resultado incorrecto. Las baterías que se usan en los aparatos de niños pequeños o en personas que no pueden hablar deben ser revisadas más seguido. Los aparatos para probar las baterías están disponibles con su audiólogo. Asegúrese de leer las instrucciones del aparato para probar baterías.

Mantenga las baterías en un lugar fresco y seco, y evite temperaturas extremadamente frías o calientes. Las baterías no deben guardarse de tal manera que se toquen unas con otras. Nunca las almacene en nada que sea metálico, como los recipientes de aluminio o estaño.

Chequeo diario

Es esencial que revise diariamente el aparato auditivo de su niño para asegurarse que el niño

está escuchando bien. Los bebés o niños pequeños no pueden decirle cuando la batería no funciona si el aparato auditivo funciona solamente algunas veces, o si el sonido se distorsiona. Muchos estudios indican que hasta el 50% de los aparatos auditivos usados en niños no funciona bien, y muchas veces esto se puede corregir fácilmente con un chequeo diario. Por favor siga los siguientes nueve pasos:

1 Revise el aparato auditivo para detectar cualquier problema. ¿Hay alguna parte rota o suelta?

2 Revise la abertura del micrófono en el aparato auditivo. ¿Está limpia y sin señales de polvo u otras partículas? ¿Hay algún daño?

3 Revise el estuche del aparato auditivo. ¿Hay daños, rajaduras, rupturas o separación? ¿Funciona bien la tapa del compartimiento de la batería? ¿Existe una tapa del compartimiento de la batería especial para que no se afloje? ¿Esta tapa es segura contra niños pequeños?

4 Revise la batería con un aparato de prueba. Es mejor si se revisan las baterías después de usarlas por un largo tiempo. Al probar las baterías el aparato de prueba debe marcar "GOOD" (bien) ó 1.4 voltios. Si marca cualquier otra cosa, cambie la batería.

5 Coloque la batería en el aparato auditivo y préndalo. Seleccione la posición que dice "ON" o "M" en el aparato auditivo.

6 Suba el volumen lentamente mientras pronuncia en voz alta los siguientes sonidos (llamados los seis sonidos Ling):

"mmm"

"oooo"

"uuuu"

"iiii"

"sh! sh! sh! sh!" (sonido similar para pedir silencio).

"ssss"

Mueva y dé pequeños golpecitos en los lados del estuche mientras escucha. ¿Se recorta el sonido o cambia de alguna forma?

7 Revise el molde de la oreja. ¿La abertura está libre de obstrucción? ¿Está el tubo blando y movable? ¿Hay alguna rajadura o área áspera en el tubo o en el molde de la oreja?

8 Revise el control del volumen. ¿Se mueve el control con facilidad? ¿Hay interferencia o falta de sonido cuando se cambia el volumen? ¿Hay aumento en el volumen al subir el control? ¿Se escuchan los seis sonidos Ling en forma natural?

9 Revise los interruptores del aparato auditivo. ¿Puede moverlos sin dificultad? ¿Hay interferencia al moverlos?