

LAID: *instrucciones para el hogar*

Ajuste del flujo

Su equipo de atención le enseñará cómo ajustar el flujo constante de la bomba. Siempre empiece lavándose las manos, luego abra la funda y extraiga el regulador de flujo. Para ajustar el flujo constante, siga las instrucciones a continuación. Al terminar, coloque el regulador de flujo de vuelta en la funda y ciérrela. Asegúrese de que el tubo este libre y no tenga torceduras.



Extraiga el protector de bloqueo azul.



En el regulador de flujo, con mucho cuidado, jale el dial blanco hacia arriba.



Para ajustar el regulador al flujo a un flujo deseado, gire el dial blanco y alínelo con el indicador de posición negro. Gire en sentido antihorario para aumentar el flujo constante. Gire en sentido horario para disminuir el flujo constante.



Empuje el dial blanco de regreso a su sitio para ajustar el flujo. **Evite presionar el anillo rojo en todo momento.**



Para asegurar el flujo temporalmente, introduzca el protector de bloqueo azul entre el anillo rojo y el dial blanco.



Para asegurar un nuevo ajuste de flujo, asegúrese de que ambas pinzas estén abiertas.



Si accidentalmente empuja el anillo rojo, el flujo estará bloqueado permanentemente. No intente levantarlo, simplemente deje el ajuste como está y avise a su médico o proveedor de atención médica.

Cómo remover el catéter


Su equipo de atención médica le dará instrucciones de cómo y cuándo remover el dispositivo. Escriba el día y la hora en que debe remover el dispositivo.

Día: _____ Hora: _____


1 Lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol.

2 Retire las gasas y el esparadrapo utilizado para mantener el catéter en su lugar.

3 Sujete firmemente el catéter cerca de la piel. Tire de él hacia atrás suavemente sacándolo de la piel. Si no se desliza fácilmente, llame a su médico.

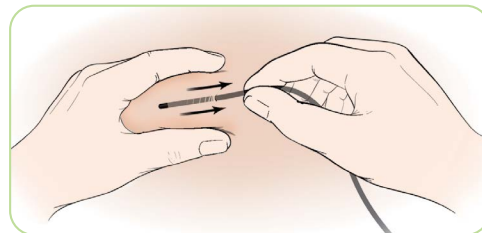

4 Revise la punta del catéter para asegurarse de que no está roto. Debería haber una marca negra en la punta. Si el catéter parece roto, póngase en contacto con su médico. Asegúrese de conservar el catéter, ya que es posible que su médico puede querer verlo.

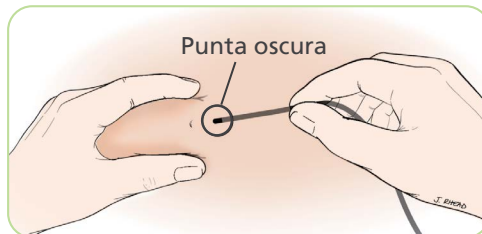

5 Cubra el sitio con una venda. No es necesario ponerse un antiséptico ni pomada.

6 Comúníquese con su médico si nota signos de infección en el lugar del catéter, incluido enrojecimiento, calor, dolor, mucha secreción o hinchazón.

LAIID: Home Instructions

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.