

# Administración de medicamentos por vía intravenosa por goteo de gravedad

## Preparación

- 1 Lávese** o desinfecte las manos por lo menos por 20 segundos.




- 2 Revise** el nombre, la dosis del medicamento, y la fecha de caducidad en la etiqueta del medicamento.

<b>Intermountain Homecare &amp; Hospice</b>	
11520 S Redwood Rd South Jordan, UT 84095-7803 385-887-7353 / 888-887-0031	
J. Smith, MD	
Xtest, Susan	
DOB: 02/02/2002	
Rx#:00110998726	03/11/2015
SOD CHL 0.9% 1000ML SOL 7983-09	Qty: 1

## 3 Prepare los suministros:

- Bolsa del medicamento. Si desea calentarlo a temperatura ambiente, déjelo en el mostrador.
- Tubos de línea intravenosa
- Jeringas de enjuague llenadas previamente:
  - Dos (2) jeringas de solución salina
  - Una (1) jeringa de heparina, si es necesario
- Tapa de alcohol desinfectante
- Toallitas estériles

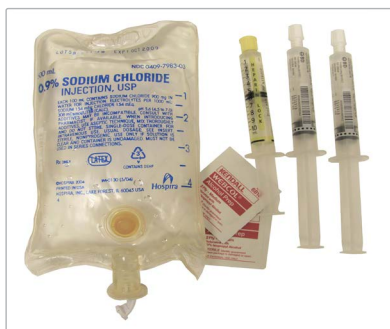

## Mis medicamentos

Medicamento: \_\_\_\_\_

Horario: \_\_\_\_\_

☐ Jeringa llenada previamente

☐ Llene la jeringa con el medicamento

### ENJUAGUE S.A.S.

Solución Salina: \_\_\_\_\_ mL

Administre el medicamento

Solución Salina: \_\_\_\_\_ mL

mL = milliliter

### ENJUAGUE S.A.S.H.

Solución Salina: \_\_\_\_\_ mL

Administre el medicamento

Solución Salina: \_\_\_\_\_ mL

Heparina: \_\_\_\_\_ mL

## ¿Necesita ayuda o tiene preguntas?

Enfermero o enfermera: \_\_\_\_\_

Número de teléfono: \_\_\_\_\_

Intermountain Homecare & Hospice:

**385-887-6000 o 800-527-1118**

Escanee el código QR al lado derecho con su teléfono celular para ver un video con las instrucciones.

<https://app.shoreline.health/s/HrxDRIVhH73D>



## Conecte el tubo de la línea intravenosa al medicamento


**1 Cierre** la pinza del tubo.



**2 Jale** la tapa de la bolsa del medicamento.



**3 Descubra** el pico en el tubo.

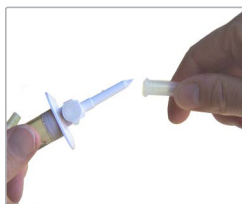

**4 Empuje** el pico hacia la bolsa del medicamento.



## Prepare el tubo de línea intravenosa

**1 Cuelgue** cuelgue la bolsa en el poste IV. Lentamente apriete y suelte la cámara de gotas hasta que esté medio lleno.



**2 Abra** la pinza del tubo hasta que salga líquido por el final del tubo.



**3 Cierre** la pinza.




## Administrar el medicamento

**1 Remueva** la tapa de alcohol de la línea intravenosa y coloque la jeringa de solución salina. **Enjuague** la línea.



**2 Coloque** el tubo de la línea intravenosa.

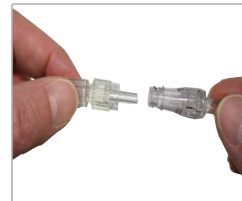

**3 Abra** la pinza del tubo.



## Después de la infusión


- 1 Lávese** las manos con la solución limpiadora.



- 2 Cierre** la pinza del tubo.



- 3 Desconecte** el tubo de la línea intravenosa y enjuague.

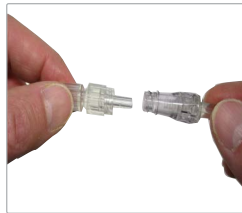

- 4 Coloque** la tapa de alcohol de color azul claro en el conector sin aguja.



- 5 Proteja** el final del tubo con una nueva tapa de alcohol.



- 6 Deje** el tubo conectado a la bolsa vacía hasta la próxima dosis. .

El tubo se puede volver a usar por hasta 24 horas.



## Notas

[illegible]

Contenido creado y aprobado por Intermountain Homecare & Hospice

## Giving Medicine in Your Gravity IV