

Hablemos Acerca De...

Botón de gastrostomía, colocación

El botón de gastrostomía, al que a veces se le llama “sonda G”, permite llevar alimentos líquidos directamente al estómago del niño. Este botón ayuda al niño a mantener un peso normal, ya que le brinda un modo de recibir alimentación complementaria. En comparación con otros métodos, el botón deja que el niño se mueva con más normalidad, porque se coloca cerca de la piel.

A veces, los padres se ponen nerviosos cuando a su hijo le van a colocar un botón de gastrostomía, especialmente si es la primera vez. Esto es normal. Si tiene dudas al respecto, llame al consultorio del médico o al Equipo de Enterostomía del Primary Children's Hospital para preguntar.

¿Cómo coloco el botón de gastrostomía?

Pasos


- 1 Reúna todo lo que va a necesitar:
 - Dos vasos, uno lleno de agua del grifo y el otro vacío.
 - Varios paños o toallas.
 - Lubricante a base de agua (como K-Y® Jelly).
 - Cinta de tela autoadhesiva (como Mefix®).
 - Kit de botón de gastrostomía.
 - Esponja de drenaje de 2 x 2 pulgadas (5 x 5 centímetros).
 - Crema protectora, de ser necesario.
- 2 Lávese las manos con jabón y agua caliente.
- 3 Acueste al niño en un lugar cómodo. Tal vez deba sostenerlo con firmeza.
- 4 Párese al lado del niño, del mismo lado del botón. El botón por lo general está del lado izquierdo. Tenga las toallas o los paños a mano para absorber los derrames que pueden ocurrir al colocar el botón.

- 5 Coloque la jeringa de 10 cc en el puerto (orificio) del globo. Según el tipo de botón de gastrostomía, este puede estar marcado con las letras “bal” o tener una línea negra. Asegúrese de que la jeringa quede firmemente conectada en el puerto del globo. Un sellado firme permite extraer el agua.



Colocación del botón de gastrostomía

- 6 Succione el agua del botón de gastrostomía tirando del émbolo de la jeringa. Deseche el agua en el vaso vacío.

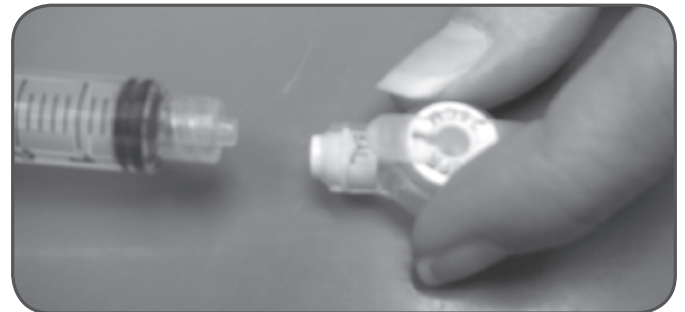

- 7 Extraiga el botón de gastrostomía. Coloque la jeringa de 10 cc en el vaso de agua limpia y succione de 3 cc a 5 cc de agua. Cinco cc de agua limpia es más o menos una cucharadita.



- 8 Tome un botón de gastrostomía nuevo del kit y póngale lubricante a base de agua.
- 9 Coloque el nuevo botón en el sitio de la gastrostomía.
- 10 Inserte de 3 cc a 5 cc de agua en el puerto del globo.
- 11 Revise el contenido del estómago de la siguiente manera:
 - Conecte la sonda de alimentación continua o en bolo al botón de la sonda G. Tome la jeringa de 60 cc del kit de la sonda G. Coloque la jeringa en el extremo de la sonda.
 - Tire del émbolo hacia atrás. Si ingresa contenido del estómago en la sonda, significa que el botón de la sonda G se encuentra en el lugar correcto.

Si no ingresa contenido del estómago en la sonda, haga lo siguiente:

- Recuerde que, si no ha alimentado al niño durante varias horas y acaba de cambiar el botón, es posible que no logre extraer ningún contenido del estómago. Coloque de 10 cc a 15 cc de agua en la sonda de alimentación en bolo, en cuyo caso extraerá contenido del estómago con agua.
- Si no logra extraer nada y se encuentra en el horario de atención de la clínica para pacientes ambulatorios (de 8 a. m. a 4:30 p. m., de lunes a viernes), llame al consultorio del médico. Tal vez le pidan que lleve al niño al hospital para que le hagan una radiografía para comprobar si el botón de gastrostomía está bien colocado.
- Si no logra extraer nada y no se encuentra dentro del horario de atención, llame al consultorio del médico para hablar con el médico o el residente que se encuentre de guardia.