

Utilización del infusor elastomérico

Un **infusor elastomérico** es un dispositivo utilizado para administrar medicamentos a través de su vía IV. El medicamento se coloca en una cámara en forma de globo, y el medicamento se administra mediante la presión ejercida por el globo a una velocidad constante y segura.

Su enfermera le enseñará cómo usar el infusor elastomérico y cómo **purgar** su vía IV. Purgar significa llenar los tubos IV con una solución para evitar que éstos coagulen (se tapen).

Utilice este folleto para recordar los pasos necesarios para usar el infusor elastomérico y para purgar correctamente su vía IV. A menos de que su enfermera le indique lo contrario, usted podrá desechar todos los suministros utilizados en la basura normal.

Información de medicamentos

Medicamento: _____

Horario: _____

Purgado S.A.S.

Salina: _____ mL

Administrar medicamento

Salina: _____ mL

Purgado S.A.S.H.



Salina: _____ mL

Administrar medicamento

Salina: _____ mL

Heparina: _____ mL

Prepare

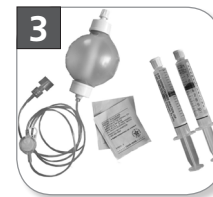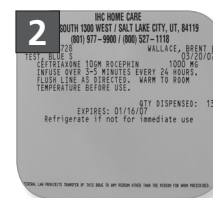

Lave sus manos con una solución limpiadora.

- Frote sus manos enérgicamente hasta que estén secas.
- Siempre lave sus manos cada vez que trabaje con su vía IV.

Asegúrese de que la etiqueta del medicamento sea la correcta.

- **Asegúrese** de que tenga su nombre, la dosis, y que no está caducado.
- Si algo está incorrecto en la etiqueta, **llame** su enfermera o farmacéutico y no use el medicamento.


Coloque los suministros.

- Jeringas para purgar
 - Dos jeringas con solución salina
 - Una jeringa de heparina (si es necesario)
- Toallitas estériles
- Tapa estéril de alcohol
- Infusor elastomérico con medicamentos
 - Puede ser calentada a temperatura ambiente colocándola en el mostrador. No la caliente en el microondas ni en agua caliente.
 - Utilice el dispositivo elastomérico una vez, luego descarta.
 - **NO** utilice el dispositivo elastomérico al bañarse o nadar.

Cebe el tubo de la vía IV




Abra la pinza del tubo de la vía IV.

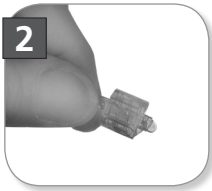

Llene el tubo con la solución.

- Observar hasta que vea goteo medicamento fuera del tubo.
- Si la solución no está fluyendo, afloje el tapón del tubo y luego vuelva a apretar.

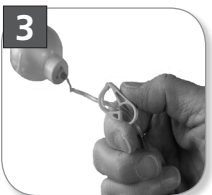


Cierre la pinza.

Prepare sus jeringas



Retire la tapa de la jeringa.

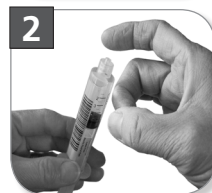


Golpee suavemente la jeringa para mover el aire a la punta.



Empuje el émbolo para eliminar extra aire y solución.

- Si es difícil empujar, tirar del émbolo hacia atrás ligeramente para romper el sello.

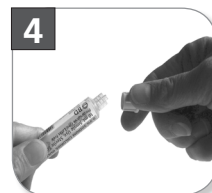


Reemplace la tapa de la jeringa hasta que esté listo para usarla.


Purgue su vía IV

- Purgue su vía IV con solución salina siguiendo “Pasos de purgado el tubo de la vía IV”.


Pasos de purgado el tubo de la vía IV

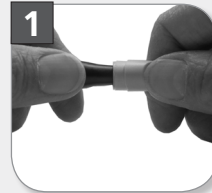


Retire la tapa estéril de alcohol y desechar.

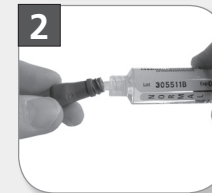

Conecte firmemente la jeringa al conector IV sin aguja utilizando un empuje y movimiento de giro.

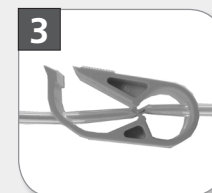

Abra la pinza.

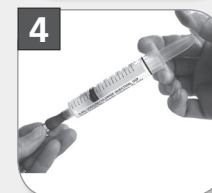

Inyecte la solución.



Cierre la pinza.



Retire y deseche la jeringa.




Conectar una nueva tapa estéril de alcohol después del purgado final.

* Si el conector sin aguja entra en contacto con algo, **LÍMPIELO** con una toallita estéril durante 15 segundos.

Administre el medicamento



1 **Limpiar** el conector sin aguja con una toallita estéril durante 15 segundos si entra en contacto con algo.

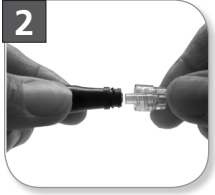

2 **Conecte** el infusor elastomérico firmemente al conector sin aguja.



3 **Asegúrese** de que la pinza de la vía IV esté abierta.

- Ponga el dispositivo en un bolsillo o bolsa durante la infusión.

Infunda la dosis completa del medicamento.

- Esto deberá tomar _____ minutos aproximadamente
- Compruebe el dispositivo a menudo.


Después de la infusión



1 El dispositivo aparecerá como éste cuando está vacío.



2 **Lave** sus manos con una solución limpiadora.

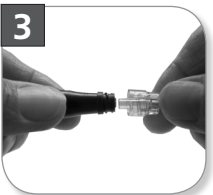

3 **Desconecte** el tubo de dispositivo del conector sin aguja.

Purgue su vía IV

Siga “Cómo purgar su línea IV” de la página 2.

- **Purgue** u vía IV con solución salina.
- **Purgue** la vía IV con Heparina, si se le indica.
- **Deseche** el dispositivo vacío en la basura regular.

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?

Enfermera _____

Número telefónico _____

Intermountain Homecare & Hospice

385-887-6000

800-527-1118



Content created and approved by Intermountain Homecare & Hospice

Using an Elastomeric Device